

# AKA

M A S K

Automatisch absorbierender Filtertyp Anti-Fog / Automatic Absorbing Filter Type Anti-Fog

Verbesserte Atemschutzmaske / Enhanced Respirator


## AKA C2 FFP2 NR

### Atemschutzmasken-Gebrauchsanweisung Half Mask User Instruction

## SCHUTZMASKE PROTECTIVE MASK FFP2 NR

EN149:2001+A1:2009

MASK / MASQUE / MASKE / MASKEER  
MASCHERE / MASCARA / MASCARAR

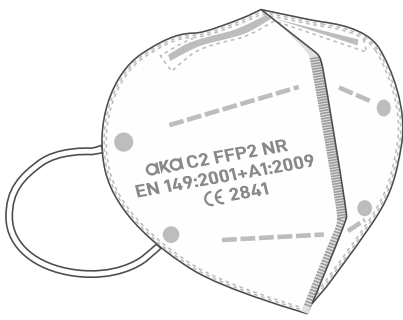

- Hohe Filtrationseffizienz
- Niedriger Atemwiderstand
- Bequem zu tragen
- More Comfortable to Wear
- Low Respiratory Resistance
- High Filtration Efficiency

### SO TRAGEN SIE IHRE MASKE

|  |                                                                                                                                           |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <b>Platzieren Sie Ihre Maske</b><br>Legen Sie die Maske mit der Innenfläche nach oben auf. Legen Sie sie auf Ihr Kinn und über Ihre Nase. | 1 |
|  | <b>Anlegen der Ohrbänder</b><br>Legen Sie die Ohrbänder nach eigenem Ermessen rechts und links über beide Ohren.                          | 2 |
|  | <b>Einstellen des Nasenbügels</b><br>Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen vorsichtig an Ihre Nase an.                              | 3 |
|  | <b>Sitz prüfen</b><br>Vergewissern Sie sich, dass die Maske Ihre Nase, Ihren Mund und Ihr Kinn vollständig bedeckt und gut sitzt.         | 4 |

### HOW TO WEAR YOUR MASK

|  |                                                                                                                      |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <b>Place your mask</b><br>Place the mask with the inner surface facing up. Place it on your chin and over your nose. | 1 |
|  | <b>Put on ear bands</b><br>Put the ear bands right & left over both ears at your own discretion                      | 2 |
|  | <b>Adjust the nose clip</b><br>Use both hands to carefully adjust the nose piece to your nose.                       | 3 |
|  | <b>Check fit</b><br>Make sure the mask completely covers your nose, mouth & chin & fits snugly.                      | 4 |

### GEBRAUCHSANWEISUNG

|   |                                                                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <b>Nicht berühren</b><br>Berühren Sie die Maske nicht, wenn Infektionsrisiko besteht. Setzen Sie in diesem Fall sofort eine neue Maske auf.                   |  |
| 2 | <b>Maske austauschen</b><br>Sollten Sie Nässe und Feuchtigkeit innerhalb oder außerhalb der Maske spüren, setzen Sie bitte sofort eine neue Maske auf.        |  |
| 3 | <b>Maximale Tragezeit</b><br>Die maximale Zeit, in der Sie Ihre Maske tragen können, beträgt 8 Stunden. Bitte überschreiten Sie die maximale Tragezeit nicht. |  |
| 4 | <b>Abnehmen</b><br>Nehmen Sie die Maske nur ab, indem Sie die Ohrbänder nach unten ziehen                                                                     |  |

### USER INSTRUCTIONS

|   |                                                                                                                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <b>Do not touch</b><br>Do not touch the mask outside in the danger area. In this case, immediately put on a new mask.                            |  |
| 2 | <b>Exchange your mas</b><br>In case of feeling wetness and humidity either inside or outside of your mask, please put on a new mask immediately. |  |
| 3 | <b>Maximum wearing time</b><br>The maximum time that you can wear your mask for one time is 8 hours. Please do not exceed maximum using time.    |  |
| 4 | <b>Taking the mask off</b><br>Take off the mask only by pulling down the ear straps.                                                             |  |



HIGH EFFICIENCY  
FILTRATION



COMFORTABLE  
LAMINATING



HEALTHY  
BREATHING




4-LAYER OF  
PROTECTION



2YEARS




NR

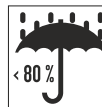

< 80 %



i

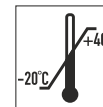

-20°C  
+40°C

Model No  
AKA C2

### Hinweis:

Diese Masken sollten NICHT getragen werden, von Kindern unter 2 Jahren, von Personen die Schwierigkeiten beim Atmen haben und von Personen die handlungsunfähig oder nicht in der Lage sind, diese Masken ohne Hilfe wieder abzunehmen.

Die Maske muss sofort gewechselt werden, wenn es beschädigt ist oder nass wird.

Verwenden Sie die Maske nicht wieder. Es wird empfohlen, die maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden nicht zu überschreiten. Waschen, desinfizieren oder erhitzen Sie die Maske nicht.

Personen, die gegen Polypropylen allergisch sind, dürfen diese Maske nicht verwenden.

### Sicherheitsausrüstung

- Kontrollieren Sie die Maske, bevor Sie in den Anwendungsbereich eintreten.
- Im Arbeitsbereich muss mindestens 19,5% Vol. Sauerstoff vorhanden sein. Andernfalls kann die Maske nicht verwendet werden.
- Die Masken schützen Sie vor Gas und Dampf nicht.
- Wechseln Sie die Maske, wenn der Atemwiderstand ansteigt.
- Wiederholen Sie den Vorgang 1-2-3-4 im Falle einer Undichtigkeit.

### Note:

Masks should NOT be worn by children under the age of 2 or anyone who has trouble breathing, is unconscious, incapacitated, or otherwise unable to remove the mask without assistance.

This mask must be immediately changed when it is damaged or wet.

This mask is just for single use.

Do not reuse the mask. We recommend the maximum application time of 8 hours not to be exceeded. Do not wash, disinfect, or heat the mask.

People who are allergic to polypropylene must not use this mask.

### Safety Equipment

- Control the mask before get in the using area.
- In working area there must be at least %19,5 oxygen otherwise mask not able to use.
- The masks do not protect you from gases and steam
- Change the mask if there will be any obvious and realizable extra air resisting.
- If there is any leakage redo the 1-2-3-4 process again.

Notifizierter Körper/Notified Body  
MNA Laboratuvarları San. Tic. Ltd. Şti. NB2841

Turkey  
Discover  
the potential

CE 2841

Zertifikate  
Certificates



Kontakt  
Contact



Manufacturer

AKA

M A S K

Akamed Tekstil Medikal Malzemeleri  
ve Cihaz San. Dış Tic. Ltd. Şti.  
Namık Kemal Mah. Sütçü İmam Cad. Tek Selvi Sk.  
No : 14 Ümraniye - İstanbul


+90 216 532 00 94 - info@akamask.com - www.akamask.com

Deutschland Distributor :

Grosshandel Hoffmann GmbH & Co.KG -  
Augustastrasse 6b 47441 Moers / Deutschland  
+49 2841 367568 - info@aka-mask.de - www.aka-mask.de

# C2 FFP2 NR

**aka**  
M A S K

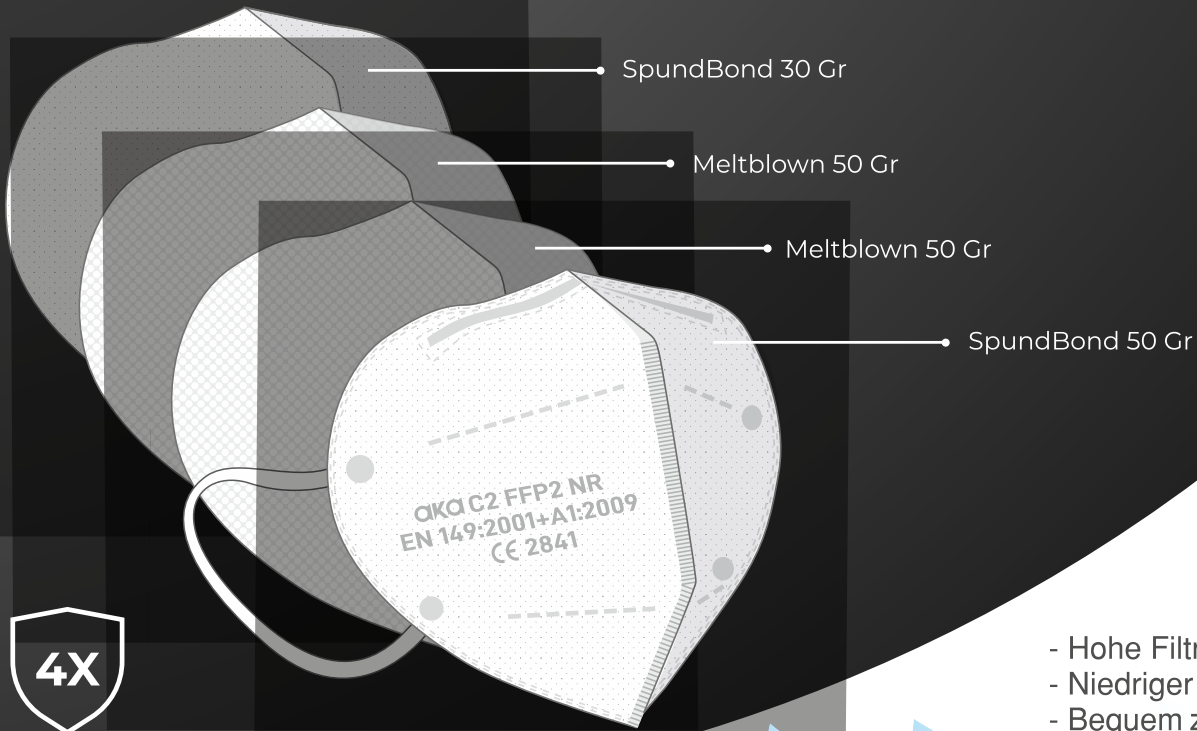

PROTECTIVE LAYERS

- Hohe Filtrationseffizienz
- Niedriger Atemwiderstand
- Bequem zu tragen

- More Comfortable to Wear
- Low Respiratory Resistance
- High Filtration Efficiency

## PROTECTIVE MASK SCHUTZMASKE FFP2 NR

EN149:2001+A1:2009


MASK / MASQUE / MASKE / MASKEER  
MASCHERE / MASCARA / MASCARAR




CE 2841 EN 149 : 2001 + A1 : 2009




# C2 FFP2 NR

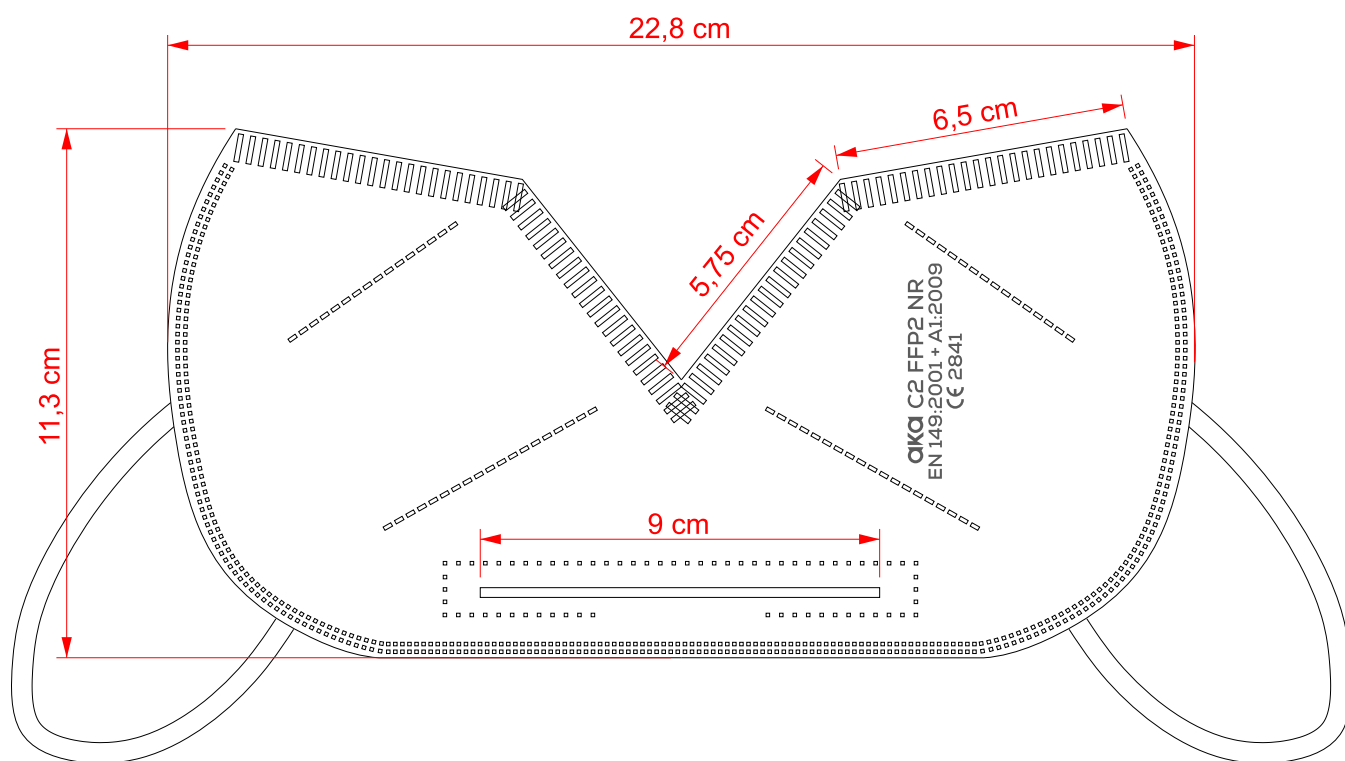

# C2 FFP2 NR

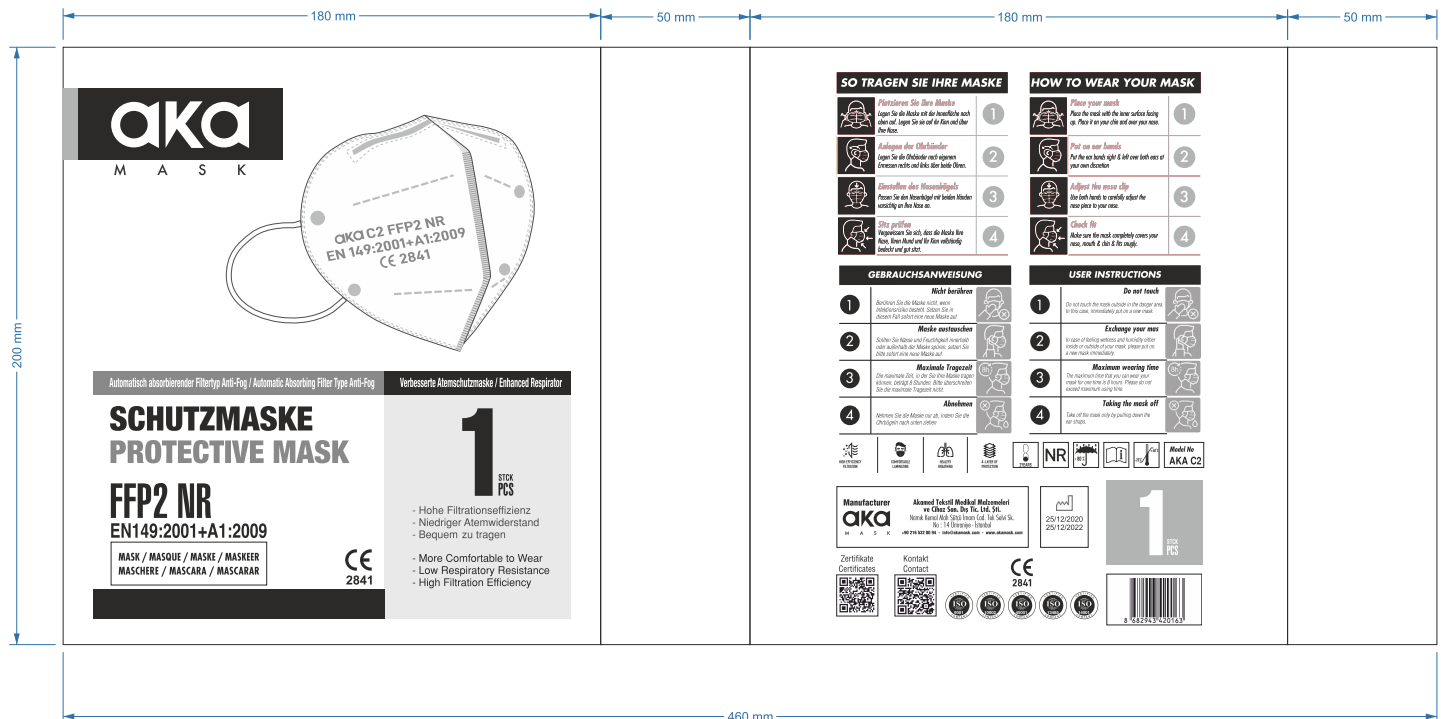

**C2 FFP2 NR**

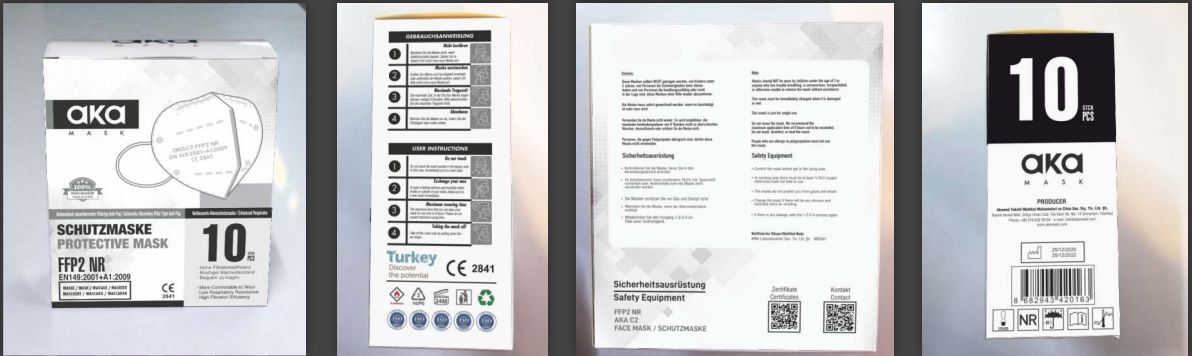

# C2 FFP2 NR



|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1910,00 mm  |           |           |           |
| 595x360x575 |           |           |           |
| 180,00 mm   |           |           |           |
| 575,00 mm   |           |           |           |
| 180,00 mm   |           |           |           |
| 595,00 mm   | 360,00 mm | 595,00 mm | 360,00 mm |
| 937,50 mm   |           |           |           |